



Presentación de la Última
Generación BiNivel por 3B Medical

Luna G3 BPAP 25A

El módem y el tubo calefactado integrados aportan un diseño elegante y de tamaño reducido. El Luna G3 BPAP 25A cuenta con nuevos ajustes y funciones que hacen que la terapia biNivel sea más cómoda y adecuada.



Luna G3 BPAP 25A
SKU: LG3700
GTIN: 00817783021159

 **3BTM Medical, Inc.**

Especificaciones

TAMAÑO DEL DISPOSITIVO

Dimensiones (L x W x H): 265 mm x 145 mm x 114 mm

Peso: 1.7 kg

Capacidad de agua: Línea de llenado máxima 360 mL

USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Funcionamiento, Transporte y Almacenamiento

Temperatura: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)

Humedad: 15% a 93% Sin condensación, 15% a 93% Sin condensación

Presión Atmosférica: 760 ~ 1060 hPa

MODO DE FUNCIONAMIENTO

Continuo

MODO DE TRABAJO

CPAP, S, AutoS

TARJETA SD

La tarjeta SD puede registrar los datos del paciente e información sobre fallos

CONSUMO DE ENERGÍA CA

100V - 240V ~, 50Hz / 60 Hz, 2 A

OFERTA DEL DISPOSITIVO AL PUERTO DE COMUNICACIONES DEL TUBO CALEFACTADO

24V.....18W

De 4 a 25 cmH₂O (en incrementos de 0.5 cmH₂O)

Solo bajo condiciones de fallo, ≤ 30 cmH₂O para modo CPAP y AutoCPAP

RAMP

El tiempo de rampa varía de 0 a 60 minutos.

NIVEL DE PRESIÓN DEL SONIDO

< 26 dB, cuando el dispositivo está funcionando a una presión de 10 cmH₂O.

FORMA Y DIMENSIONES DEL PUERTO DE CONEXIÓN DEL PACIENTE

La salida de aire cónica de 22 mm cumple con la ISO 5356-1.

Código Suministros de Reemplazo

LG31020

Filtro de Aire Luna G3

LG34510

Cámara de Agua Luna G3

LG3B

Bolsa de transporte Luna G3


LG3HT

Tubo Calefactado Luna G3

Diseño Ultra Moderno con una Interfaz Fácil de Usar



Fácil acceso a las funciones más frecuentes.

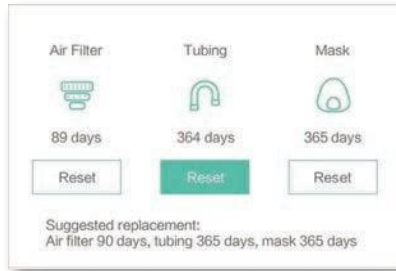



Un recordatorio de suministros de reemplazo mantiene su tratamiento de manera correcta.



Pantalla en espera con Humedad, Temperatura y Reloj para mayor comodidad.

Función de Pre calentamiento

La serie G3 cuenta con una función de pre calentamiento para calentar el agua de su humidificador y brindarle la máxima comodidad.

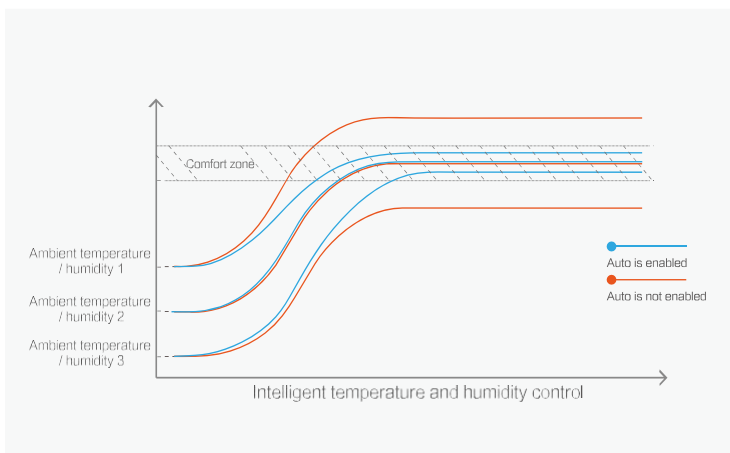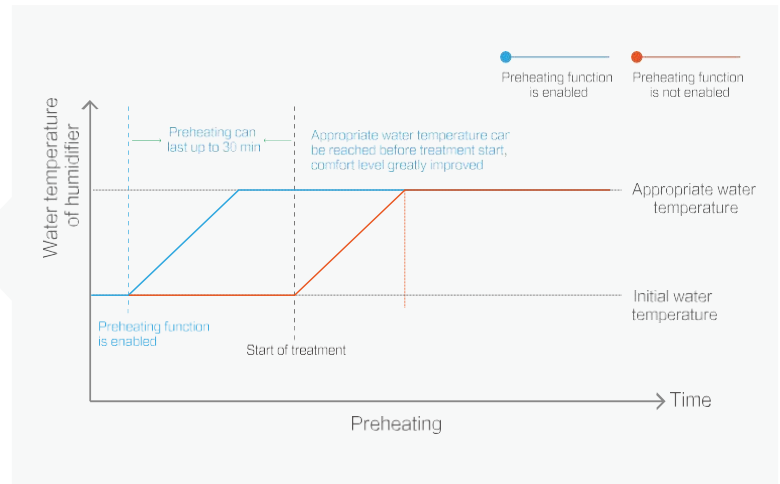


Tubo Calefactado Integrado

El Auto Control de Humedad Inteligente permite la máxima humedad G3, al tiempo que garantiza que la condensación de lluvia en el circuito no sea un problema.

Auto Rampa

La nueva función auto rampa detecta cuando se duerme el usuario y ajustará el tiempo de rampa de forma adecuada.

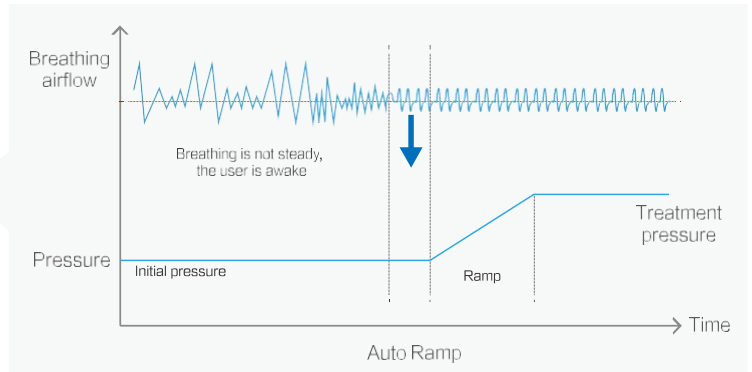

Excelente Calidad de Sonido

La tecnología de reducción del sonido multi-etapas se utiliza para garantizar un rendimiento sonoro inferior a 26dB.

Transferencia de Datos

